

発注のご案内

モデル	仕様
68950	光強度コントローラおよびデジタルタイマ、RS-232
68952	リサーチハウジング用アダプタキット
68954	アダプタキット、Qシリーズハウジング、付属品：フィルタホルダおよびビームアッテネータ
71594	光学ホルダ、ロッドマウント、1 in
7123	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 x 0.38 in、有効開口0.8 in

*こちらは、光強度コントローラまたは光線量制御を必要とされないお客様用のスタンドアロンタイプのデジタルタイマです。68950光強度コントローラにはこのデジタルタイマが付属しています。

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。

フランジマウントセル Flange Mounted Cells



フランジマウントセル

- 漏洩のない光路を形成
- 安価な止めネジモデルおよび便利な簡単接続モデル
- さまざまなセルを多段接続

このシンプルなマウントは、一端に1.5インチシリーズメス型フランジ、他端にオス型フランジを備えています。弊社の光源、モノクロメータおよびその他のフランジ付機器の入射口および出射口に光学アクセサリを接続するのに最適です。

止めネジ型および簡単接続型

頻りに解体する用途には、簡単接続モデルのご使用をお勧めしています。こちらは、工具を使用しなくてもオス型フランジ付部品にスナップ式に着脱することができます。止めネジモデルは、3つの止めネジを使用してオス型フランジに接続します。いずれのタイプも光漏れを防ぐようになっています。

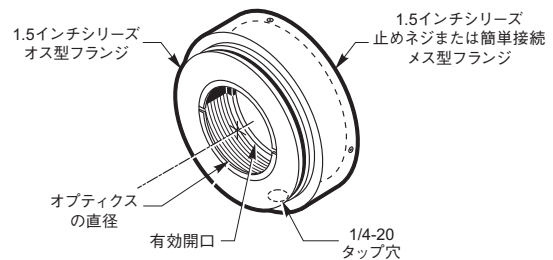


図1. Oriel®フランジマウントセルの図

発注のご案内

モデル	仕様
7123	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 in x 0.38 in、有効開口0.8 in
71306	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、厚さ1 in x 0.38 in、有効開口0.8 in、簡単接続
6195	フランジ付レンズホルダ、1.5インチシリーズ
6213	フランジマウントセル、1.5インチシリーズ、直径2 in x 0.94 inのオプティクス、有効開口1.5 in

WEB 詳細は当社のWebサイトを参照してください。